


Носовые тампоны MEROCEL®HEMOX®

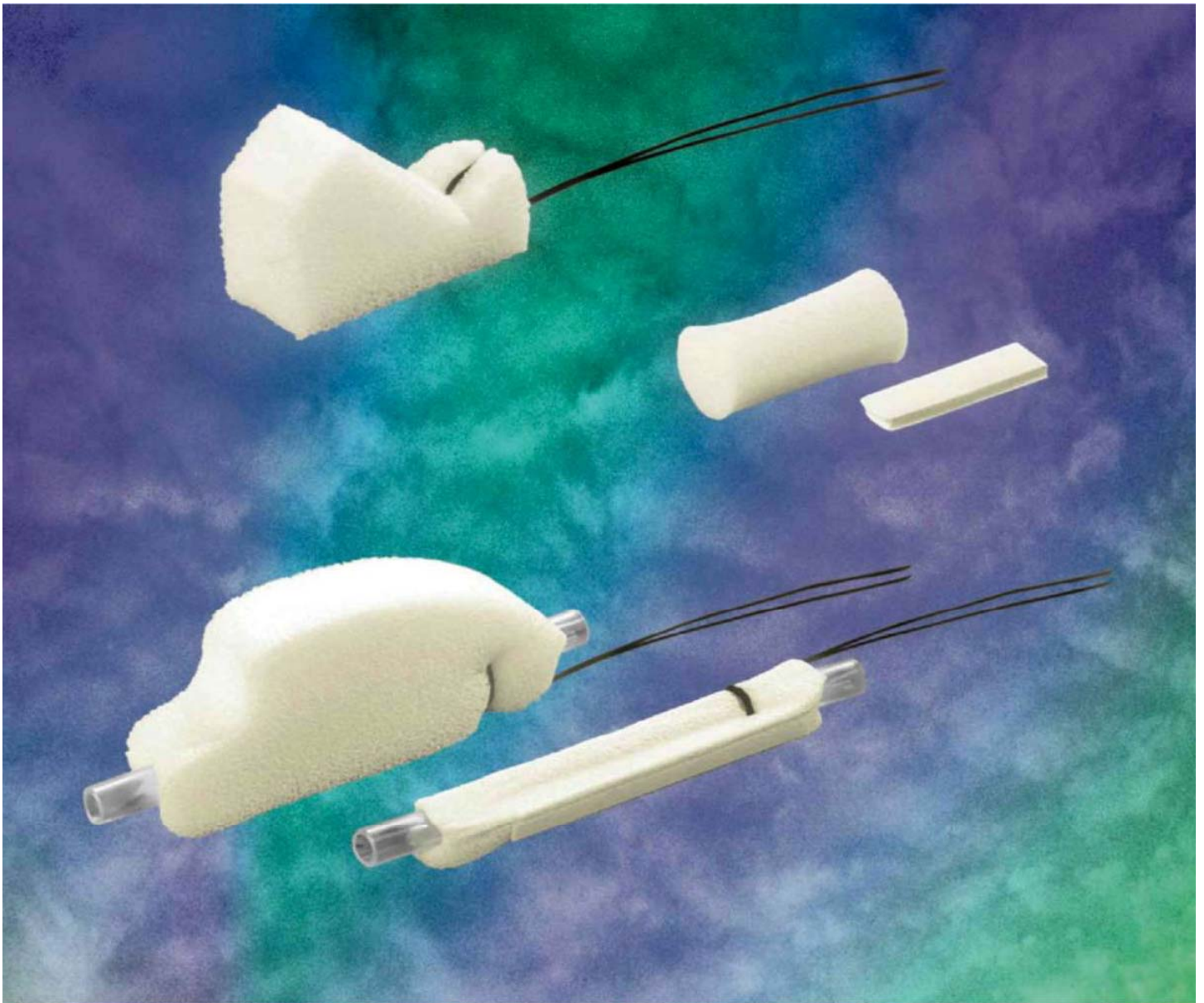

Новый продукт с клинически проверенным гемостатическим эффектом

Послеоперационные носовые тампоны

Merocel®hemoX® изготовлен из спрессованной микропористой Merocel губки с оксидцеллюлозой - клинически проверенным гемостатическим компонентом. При использовании тампона внешняя поверхность губки максимально увлажняется, что обеспечивает наиболее щадящее действие на ткани при удалении тампона и уменьшение количества повторных кровотечений за счет снижения адгезии к слизистой.

- Доклинические лабораторные испытания показали снижение на 30% физических усилий при удалении губки из носовых ходов по сравнению с носовыми тампонами из других материалов.

- Стентирующее действие предотвращает смещение средней носовой раковины и предотвращает адгезию тканей.

- Впитывает жидкости в 20 раз больше собственного веса.

- Три разных размера тампонов позволяют приспособиться к различной анатомии носа.

A.450407 Носовой тампон Baron Sinus Pak

2.5 см. длина x 1.2 см. ширина x 2 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

B.450531 Носовой тампон Baron Ultra-Slim Sinus Pak

2.5 см. длина x 0.6 см. ширина x 2.0 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

C.450422 Носовой тампон Kennedy Sinus Pak

3.5 см. x 1.2 см. x 1.2 см.

Нить для удаления, 10 шт./кор.

D.450426 Носовой тампон Kennedy Slim-Profile Sinus Pak

3.5 см. длина x 0.9 см. ширина x 1.2 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

E.450530 Носовой тампон Kennedy Ultra-Slim Sinus Pak

3.5 см. длина x 0.6 см. ширина x 1.2 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

F.450428 Носовой тампон Toffel Slim Profile Sinus Pak

4.5 см. длина x 0.9 см. ширина x 2.0 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

Носовая тампонада по Doyle

Носовые тампоны Merocel®hemoX® изготавливаются разных форм и размеров, с нитью для извлечения, а так же с трубкой для дыхания или без неё.

- Идеальны для использования при септопластике, ринопластике, конхотомии и других интраназальных процедурах.

G. 450411 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing with Airway

7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

H. 450413 Носовой тампон Slimline Doyle Nasal Dressing


7.7 см. длина x 1.0 см. ширина x 3.3 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

I. 450424 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing

7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

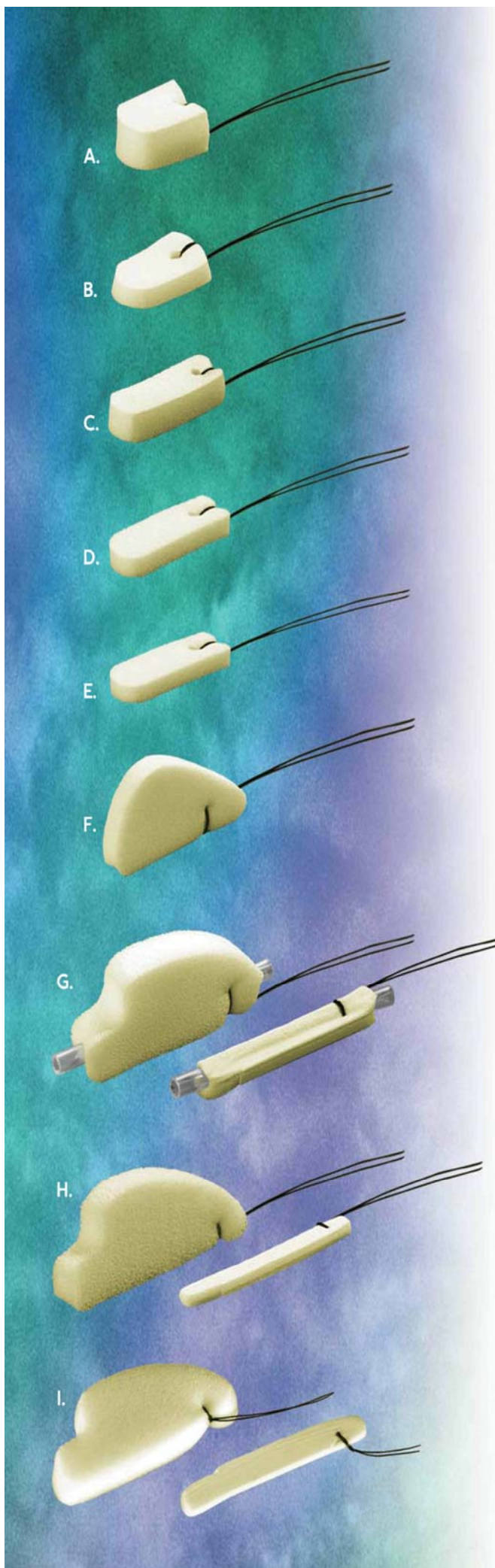


Познакомьтесь с достоинствами Merocel® hemoX®

Merocel®hemoX® с микродисперсной оксицеллюлозой хороший абсорбирующий материал. Впитывая жидкость, тампон уменьшает отечность прилежащих тканей, мягко их сдавливает, уменьшая кровоточивость, абсорбирует кровь и жидкость.

Губка Merocel равномерно импрегнирована микродисперсной оксицеллюлозой, поэтому поверхность тампона равномерно увлажнена и легко скользит, что позволяет легко его извлечь, не травмируя окружающие ткани. Исследования показали отличное впитывание жидкости и более легкое удаление тампона, снижение частоты повторных кровотечений по сравнению с другими тампонами Merocel, высокую эффективность оксицеллюлозы при носовых кровотечениях.

Для атравматичного бескровного удаления тампон необходимо намочить. Достаточно 10 мл. физраствора или воды. После размягчения тампон может быть аккуратно извлечен с помощью пинцета.

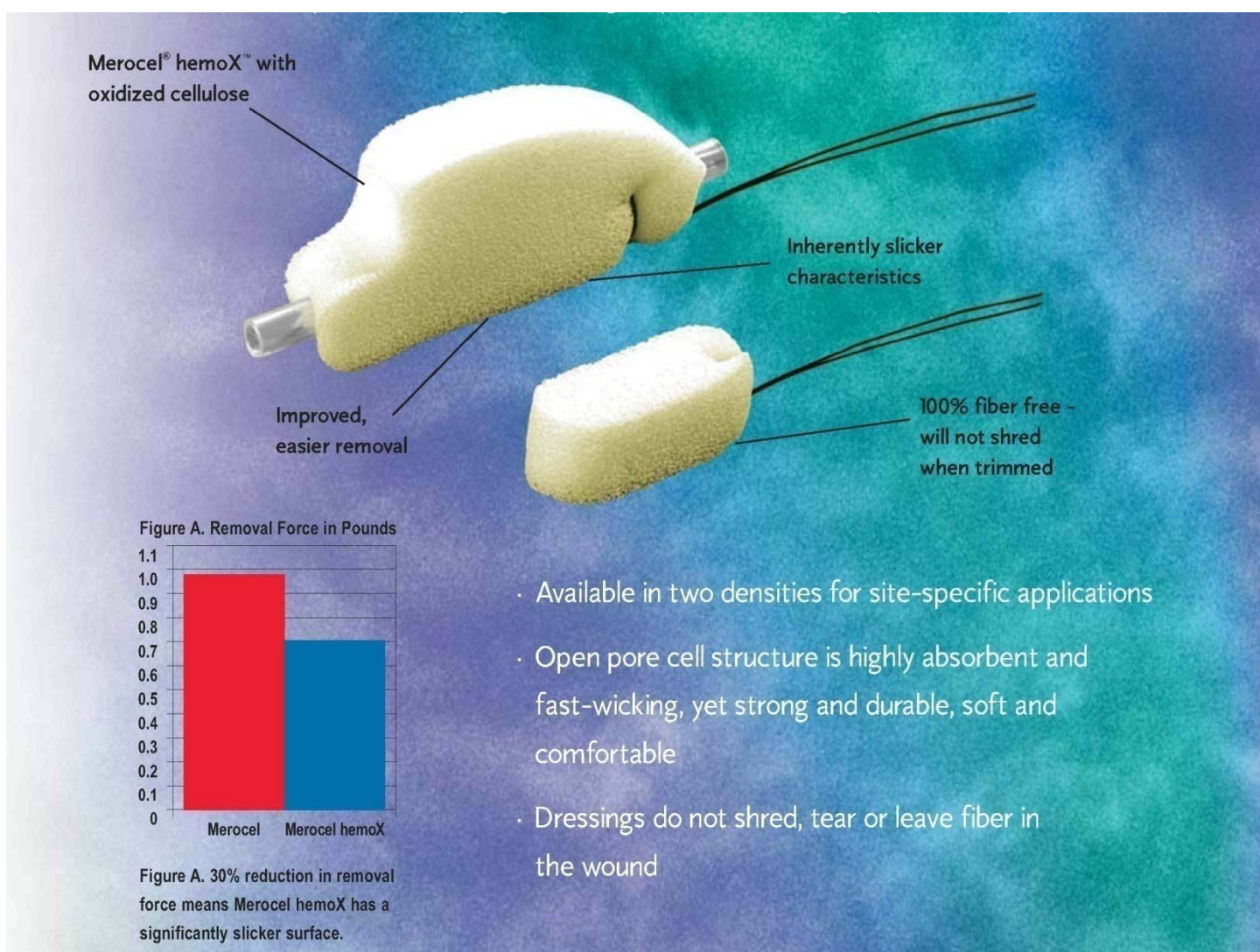

ВАШИ ПАЦИЕНТЫ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМПОНОВ

Merocel® hemoX®

Гемостатические носовые тампоны

Merocel®hemoX® гемостатические тампоны производятся из мягкой, крупнопористой Merocel губки с оксигеллюлозой. Это способствует максимальной абсорбции и впитыванию жидкости, уменьшению боли и снижению частоты повторных кровотечений после удаления тампона.

- Быстрый, эффективный метод остановки носового кровотечения.
- Тампон вводится быстро и аккуратно, деликатное сдавливание тканей уменьшает кровотечение, агрегация клеток крови на поверхности тампона способствует более быстрому образованию тромба.
- Идеальное средство для бригад Скорой помощи

J. 450406 Носовой тампон Pope Epistaxis Packing

10 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.5 см. высота
Нить для извлечения, 10 шт./кор

K. 450421 Носовой тампон Weimert Epistaxis Packing

5.5 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.5 см. высота
Нить для извлечения, 10 шт./кор

L. 450416 Носовой тампон Staxi-Stat® Epistaxis Packing

Нить для извлечения, 10 шт./кор.

Носовая тампонада

Merocel®hemoX® губка выпускается различной формы и размеров. Тампон может изготавливаться с дыхательной трубкой или без неё.

- Атравматичное удаление
- Идеальна для использования после септопластики, ринопластики, резекции хоаны и других интраназальных процедур

M. 450410 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with Airway

8.0 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.

N. 450402 Носовой тампон Standard Nasal Dressing


8.0 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.


O. 450400 Носовой тампон Standard Nasal Dressing

4.5 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.

P. 450409 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with Airway

4.5 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота
Нить для извлечения, 10 шт./кор.

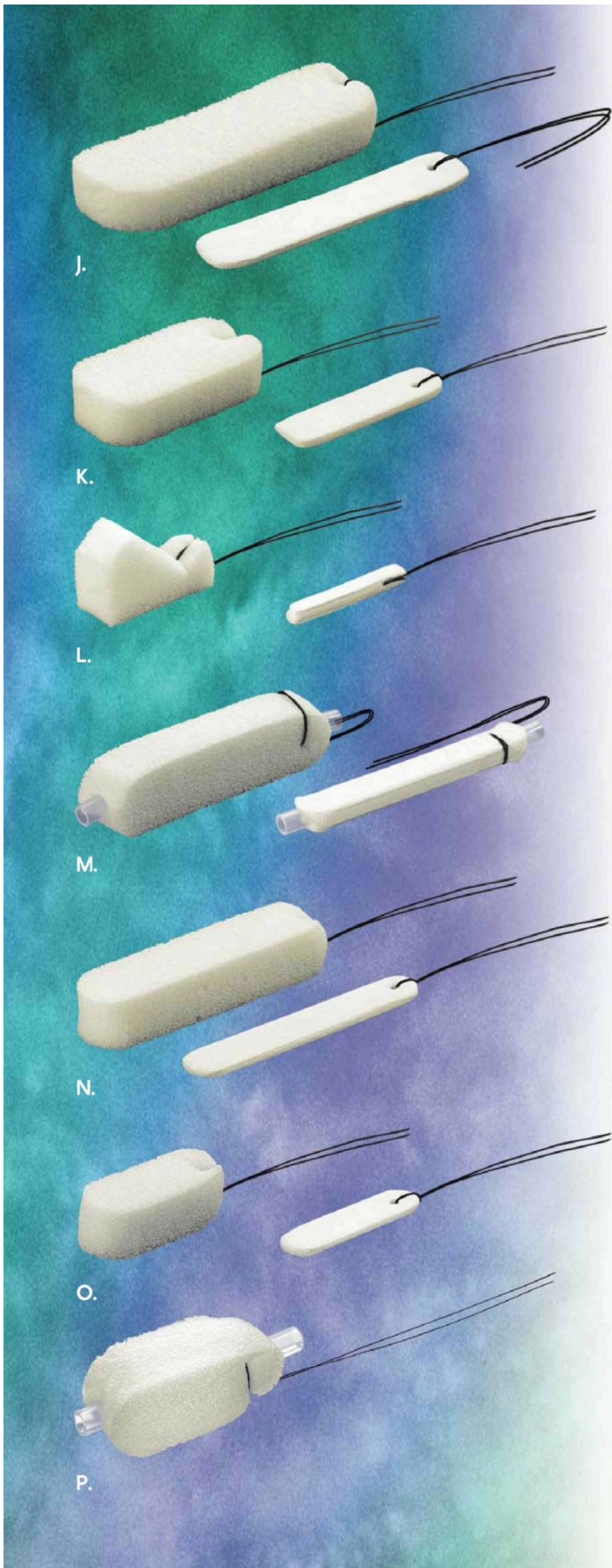

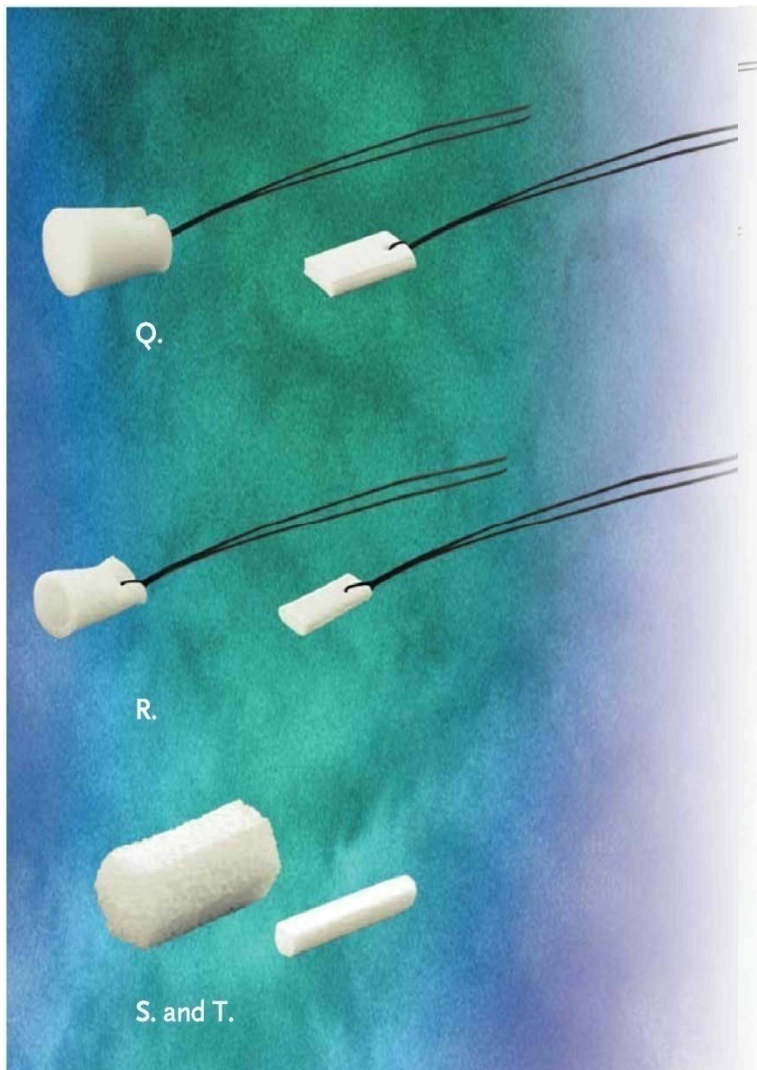

Ушные тампоны и вкладыши

Ушные тампоны разработаны для лечения наружных отитов otitis externa (ухо пловца).

· Мягкая абсорбирующая губка расширяется, обеспечивая комфорт, и сохраняет антибиотики в наружном слуховом проходе.

Ушные тампоны изготовлены из плотной микропористой Merocel® губки из оксицеллюлозы. Это помогает снизить риск врастания тканей, сохраняет наружный слуховой проход открытым и удерживает на месте лоскут при операциях на среднем ухе.

Q. 450355 Ушной тампон Schindler Ear Packing

15 мм. длина x 12 мм. диаметр. Нить для удаления, 10 шт./кор.

R. 450356 Ушной тампон Schindler Ear Packing

13 мм. длина x 9 мм. диаметр. Нить для удаления, 10 шт./кор.

S. 450146 Ушной тампон Pope Ear Wick

24 мм. длина x 9 мм. diameter, 10 шт./кор.

T. 450141 Ушной тампон Pope Ear Wick

15 мм. длина x 9 мм. диаметр, 50 шт./кор.

Удобная маркировка

Форма и размеры тампонов Merocel®hemoX® соответствуют размерам и формам стандартных тампонов. Каталогный номер стандартного тампона Merocel расположен напротив.

При сравнении с другими продуктами

Merocel® исследования показали,

что Merocel®hemoX® :

- лучше скользит при введении и удалении тампона

- обладает более выраженным гемостатическим эффектом

За дополнительной информацией

обращайтесь в Medtronic ENT


по телефону 800-874-5797 или

904-296-9600, а также на сайт


www.medtronic.com

Merocel hemoX	Description	Standard Merocel
450407	Baron Sinus Pak	400407
450411	Doyle Nasal Dressing with Airway	400411
450424	Doyle Nasal Dressing	400424
450422	Kennedy Sinus Pak	400422
450530	Kennedy Ultra Slim Profile	400530
450410	Nasal Dressing with Tube, 8 cm	400410
450400	Nasal Dressing, 4.5 cm	400400
450402	Nasal Dressing, 8 cm	400402
450409	Nasal Pak, 4.5 cm, with Airway	400409
450141	Pope Ear Wick, 15 mm	400141
450146	Pope Ear Wick, 24 mm	400146
450406	Pope Epistaxis Packing	400406
450355	Schindler Ear Pak	400355
450356	Schindler Ear Pak	400356
450426	Kennedy Slim Profile	400426
450413	Doyle Nasal Dressing Slimline	400413
450416	Staxi-Stat® with Drawstring	400416
450428	Toffel Slim Profile	400428
450531	Baron Ultra-Slim Profile	400531
450421	Weimert Epistaxis Packing	400421

Arteries of the Lateral Wall


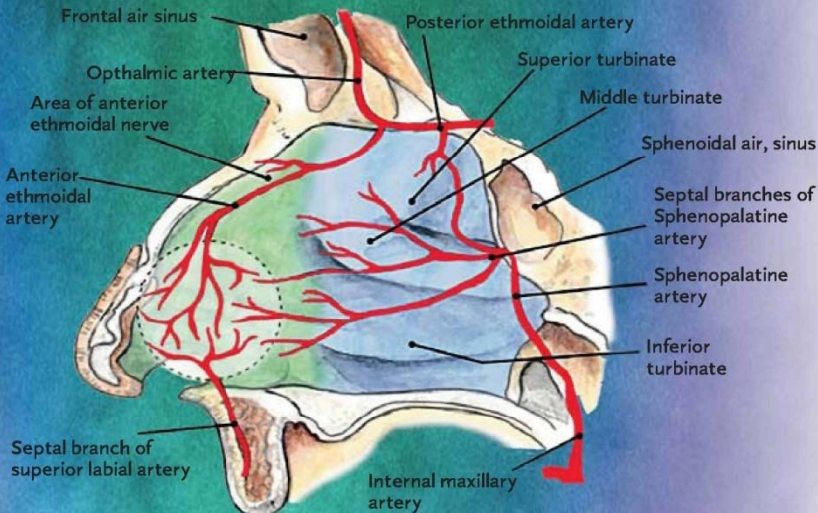


Insertion

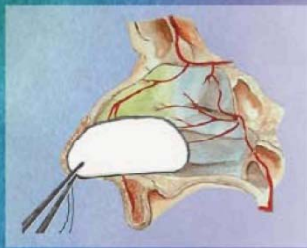


Removal

Arteries of the Septum

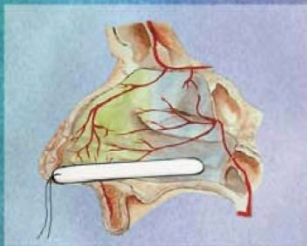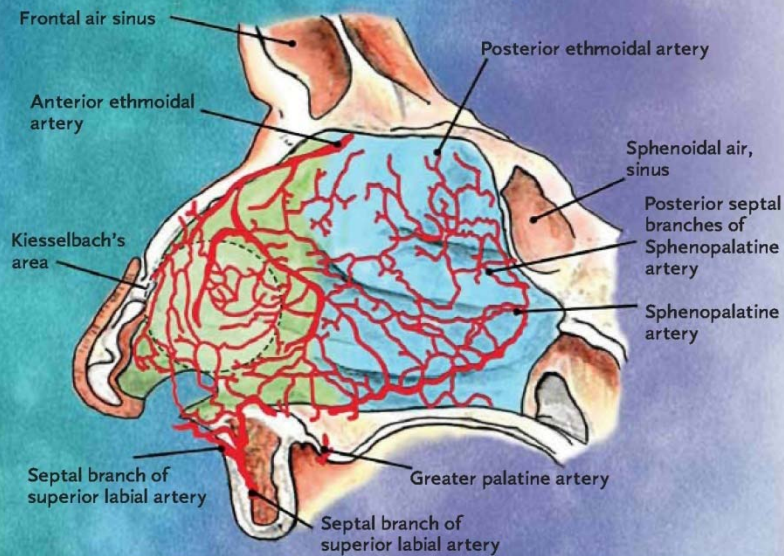

Insertion

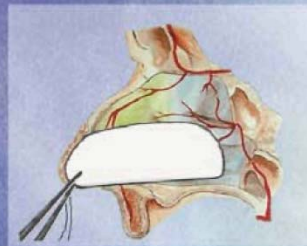

Removal

Передняя тампонада носа по Weimert, введение и удаление тампона

Введение тампона

Нанесите на тампон мазь или гель с антибиотиком, возьмите тампон за конец с фиксированной нитью пинцетом или пальцами. Аккуратно и быстро введите тампон через носовой ход в полость. Если тампон не расправится в течении 30 секунд, смочите его 10 мл. физраствора или воды. Зафиксируйте нить на коже около носа, лишние кончики отрежьте.

Удаление

Для аккуратного удаления намочите тампон 10 мл. физраствора или воды. Размягченный тампон захватите пинцетом и аккуратно извлеките.

Задняя тампонада по Pore, введение и удаление

Введение тампона

Нанесите на тампон мазь или гель с антибиотиком, возьмите тампон за конец с фиксированной нитью пинцетом или пальцами. Очень быстро введите тампон в носовой ход на всю глубину. Если тампон не расправится через 30 секунд, смочите его 10 мл физраствора или воды. Зафиксируйте нить на коже около носа, лишние кончики отрежьте.

Удаление

Для аккуратного удаления намочите тампон 10 мл физраствора или воды. Размягченный тампон захватите пинцетом и аккуратно удалите.

Medtronic USA, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, FL 32216
USA
www.MedtronicENT.com
Phone: 904-296-9600
Fax: 904-296-9666

International Telephone Numbers

Australia: 1-800-668-670
Belgium: 32-2456-09-09
Canada: 1-800-217-1617
China: 86-21-50800998
France: 33-470-679-800
Germany: 49-211-5293-209
Hong Kong: 852-2919-1312
India: 91-22-26836733
Italy: 39-02-24137-324
Japan: 81-6-4795-1506
Korea: 82-2-3404-3600
Lebanon: 961-1-370-670
Luxembourg: 32-2456-09-09
Netherlands: 31-45-566-8371
Poland: 48-22-465-6942
Singapore: 65-6776-6255
Spain: 34-91-625-05-40
UK: 44-1923-205-166
USA: 1-904-296-9600



Merocel hemoX is manufactured with m-doc™ technology (micro-dispersed oxidized cellulose). m-doc is a trademark of Alltracel, Inc.
™Trademark and ®Registered marks of Medtronic Xomed, Inc.

For the exclusive use of physicians.

897148 2004-069 12.05 Rev 2.0



Medtronic

Alleviating Pain · Restoring Health · Extending Life